

Οδηγίες χρήσης WL-clean/WL-cid/WL-dry ή WL-Blow

Για τη χειροκίνητη επεξεργασία, τον καθαρισμό και την απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών ιατρικών και οδοντιατρικών κοίλων ιατρικών εργαλείων (π.χ. τουρμπινών, εργαλείων χειρός και γωνιωμένων εργαλείων).



Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία όσον αφορά τη ροή εργασιών και τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOP) μπορείτε να λάβετε στον ιστότοπό μας: www.alpro-medical.de, ή μπορείτε να τις ζητήσετε μέσω e-mail: info@alpro-medical.de, ή μέσω τηλεφώνου: **+49 7725 9392-0**.



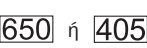
Περιεχόμενα

1.	Οδηγίες χρήσης	4
2.	Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις πληροφορίες, τις ετικέτες και τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος	4
3.	Ομάδα-στόχος	4
4.	Προβλεπόμενη χρήση	5
4.1	Προβλεπόμενος σκοπός	5
4.2	Ενδείξεις	5
4.3	Αντενδείξεις	5
5.	Εφαρμογή	6
5.1	WL-clean (1)	6
5.2	WL-clean (1) Εύρος δράσης	6
5.3	WL-cid (2)	7
5.4	WL-cid (2) Εύρος δράσης	7
5.5	WL-dry/WL-Blow	8
5.6	Ιδιότητες WL-dry/WL-Blow	8
5.7	Συντήρηση	9
6.	Στοιχεία παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών)	10–14
7.	Δηλώσεις κινδύνου και προφυλάξεις	14
8.	Οδηγίες απόρριψης	15
8.1	Απόρριψη των προϊόντων WL-clean, WL-cid και WL-dry	15
8.2	Απόρριψη της συσκευασίας	15
9.	Αναφορά περιστατικών	15

1. Οδηγίες χρήσης

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις ακόλουθες οδηγίες για να εγγυηθείτε μια απρόσκοπτη, οικονομική και ασφαλή εργασία.

2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις πληροφορίες, τις ετικέτες και τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος

	συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	προσοχή, πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
	ημερομηνία λήξης (ημερομηνία λήξης) MM-EEEE
	κωδικός παρτίδας (6 ψηφία)
	αριθμός καταλόγου
	Medical Device
	Σύμβολο ΕΟΚ για τις τελικές συσκευασίες
	Σύμβολο CE για Ιατροτεχνολογικές Συσκευές κατηγορίας I
	Σύμβολο CE με αριθμό αναγνώρισης του Κοινοποιημένου Οργανισμού (0297) για ιατροτεχνολογικά προϊόντα των κατηγοριών IIa, IIb ή III
	όριο θερμοκρασίας (θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς)
	προστατέψτε το από το ηλιακό φως
	ο συνολικός όγκος (σε ml) είναι ο όγκος (μέχρι το χείλος) του ανοικτού δοχείου υπό πίεση
	σύμβολο για τη συμμόρφωση με την οδηγία 75/324/ΕΟΚ για τους διανομείς αερολυμάτων
	κατασκευαστής
	εταιρικό λογότυπο της ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

3. Ομάδα-στόχος

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης απευθύνονται σε όλους τους χρήστες (γιατρούς, οδοντιάτρους και επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και επαγγελματίες υγείας) σε ιατρικές και οδοντιατρικές εγκαταστάσεις.

4. Προβλεπόμενη χρήση

4.1 Προβλεπόμενος σκοπός

WL-clean (1) CΕ

Διάλυμα έτοιμο προς χρήση για τον καθαρισμό χωρίς πρόσδεση πρωτεϊνών (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) πριν από την απολύμανση/αποστείρωση ιατρικών και οδοντιατρικών κοίλων ιατρικών εργαλείων, όπως οι στρόβιλοι (τουρμπίνες), τα εργαλεία χειρός και τα γωνιωμένα (contra-angle) εργαλεία, και τα εργαλεία και ενδοσκοπία εσωτερικής ψύξης. Το WL-clean είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I. Η απόδειξη της καταλληλότητάς του για καθαρισμό παρασχέθηκε σύμφωνα με τη σειρά προτύπων DIN EN ISO 15883 και τις προδιαγραφές της DGSV – „Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung“ – και επιβεβαιώθηκε από εκθέσεις εμπειρογνομόνων.

WL-cid (2) CΕ 0297

Διάλυμα έτοιμο προς χρήση για την απολύμανση (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) ιατρικών και οδοντιατρικών κοίλων ιατρικών εργαλείων. Το WL-cid είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας IIb. Η μείωση του χώματος και των μικροβίων υπό προσομοιωμένες πρακτικές συνθήκες σύμφωνα με το DIN EN ISO 15883 επιβεβαιώθηκε από εκθέσεις εμπειρογνομόνων. Απόδειξη της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης σύμφωνα με την KRINKO 2012, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της DVV/RKI 2017, καθώς και τον κατάλογο απαιτήσεων για την απολύμανση οργάνων της DGHM/VAH – „Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie/Verbund für Angewandte Hygiene“.

WL-dry CΕ

Έτοιμο προς χρήση σπρέι για το στέγνωμα μετά τον καθαρισμό και/ή την απολύμανση των εσωτερικών επιφανειών ιατρικών και οδοντιατρικών κοίλων εργαλείων.

Το WL-cid είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I.

WL-Blow

Το πιστόλι πεπιεσμένου αέρα WL-Blow με ενσωματωμένο περιοριστή ροής αέρα χρησιμοποιείται για την εκτόνωση, το στέγνωμα και την υποστήριξη του καθαρισμού μετά τη χρήση του WL-clean/WL-cid* (καθαρισμός/απολύμανση) στις εσωτερικές επιφάνειες κοίλων οργάνων και οργάνων μετάδοσης. Το WL-Blow προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο χώρο επεξεργασίας και μπορεί να συνδεθεί με τον διαθέσιμο συμπιεστή ξηρού αέρα που λειτουργεί χωρίς λάδι**!

WL-Blow StarterSet

Σετ για τον καθαρισμό, την απολύμανση και το στέγνωμα ιατρικών και οδοντιατρικών εργαλείων μετάδοσης (αποτελείται από 2 x WL-clean, 2 x WL-cid, 1 x WL-Blow Set).

WL-dry StarterSet

Σετ για τον καθαρισμό, την απολύμανση και το στέγνωμα ιατρικών και οδοντιατρικών εργαλείων μετάδοσης (αποτελείται από 2 x WL-clean, 2 x WL-cid, 2 x WL-dry).

4.2 Ενδείξεις

Για την επεξεργασία κοίλων εργαλείων που δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σε λουτρό εμβάπτισης.

4.3 Αντενδείξεις

Το WL-cid μπορεί να προσβάλλει πλαστικά και καουτσούκ (π.χ. χλωροβουτύλιο) και έχει χαμηλή επίδραση στην επίστρωση Ni (νικελίου). Μην χρησιμοποιείτε το WL-cid σε άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκοπία.

* Λάβετε υπόψη τις εγκρίσεις των κατασκευαστών!

** Σύσταση: με φίλτρο βακτηρίων.

Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμοκρασία δωματίου (18 °C – 23 °C).

Κρατήστε τα δοχεία ψεκασμού σε όρθια θέση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

5. Εφαρμογή

5.1 WL-clean (1)

Προκαταβολικός καθαρισμός με WL-clean χωρίς πρόσδεση πρωτεΐνης



- 5.1.1 Συνδέστε σταθερά τον κατάλληλο **ALPRO-Adapter*** στο δοχείο **WL-clean (1)**.
- 5.1.2 Συνδέστε το όργανο στον προσαρμογέα.
- 5.1.3 Ψεκάστε το όργανο **για 3 x 2 δευτερόλεπτα**.
- 5.1.4 Αφαιρέστε το εργαλείο από τον προσαρμογέα.
- 5.1.5 Τοποθετήστε το όργανο κάτω και αφήστε το διάλυμα καθαρισμού να **δράσει για 1 λεπτό**.
- 5.1.6 Μην επαναχρησιμοποιείτε το ξεπλυμένο διάλυμα.

Σημείωση: Μετά τον καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών, καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με κατάλληλα πανιά εμποτισμένα με WL-clean, π.χ. με ALPRO MaxiWipes reel, ALPRO CleanWipes ή με πανιά πολλαπλών χρήσεων, Premium Special (σύμφωνα με την „Verbund für Angewandte Hygiene“).

Βασικός καθαρισμός: Κατά την πρώτη χρήση συνιστούμε να εκτελέσετε έναν βασικό καθαρισμό με παρατεταμένο χρόνο επαφής 5 - 10 λεπτών. Τα πιθανά διαλυμένα υπολείμματα θα πρέπει να ξεπλυθούν στη συνέχεια. Για το σκοπό αυτό επαναλάβετε τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 5.1.2.

5.2 WL-clean (1) Εύρος δράσης

- καθαρισμός (πρακτική δοκιμή με δοκιμαστικό χρώμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 15883-5)

* Σημείωση: Χρησιμοποιείτε προσαρμογείς μόνο σύμφωνα με τις εγκρίσεις εφαρμογής των κατασκευαστών των οργάνων. Ανατρέξτε στη σελίδα 10 – 14 των παρόντων οδηγιών χρήσης.

5.3 WL-cid (2)

Απολύμανση με WL-cid



- 5.3.1 Συνδέστε σταθερά τον κατάλληλο **ALPRO-Adapter*** στο δοχείο **WL-cid (2)**.
- 5.3.2 Συνδέστε το όργανο στον προσαρμογέα.
- 5.3.3 Ψεκάστε το όργανο **για 2 x 3 δευτερόλεπτα**.
- 5.3.4 Αφαιρέστε το εργαλείο από τον προσαρμογέα.
- 5.3.5 Τοποθετήστε το όργανο κάτω και αφήστε το διάλυμα καθαρισμού να **δράσει για 5 λεπτά**.
- 5.3.6 Μην επαναχρησιμοποιείτε το ξεπλυμένο διάλυμα.

Σημείωση: Μετά την απολύμανση των εσωτερικών επιφανειών, απολυμάνετε τις εξωτερικές επιφάνειες με κατάλληλα πανιά εμποτισμένα με WL-cid, π.χ. με ALPRO MaxiWipes reel, ή με πανιά πολλαπλών χρήσεων, Premium Special (σύμφωνα με τη Γερμανική „Verbund für Angewandte Hygiene“).

5.4 WL-cid (2) Εύρος δράσης σε 5 λεπτά:¹

Κριτήρια δοκιμής: συνθήκες καθαριότητας, θερμοκρασία δωματίου:

- **βακτηριοκτόνο** (EN 13727, EN 13697)
- **μυκητοκτόνο** (EN 13624, EN 13697, EN 17387)
- **μυκοβακτηριοκτόνο** (EN 14348, EN 13697, EN 17387)
- **ιοκτόνο** (EN 14476, EN 16777²) κατά των ιών με περίβλημα, δηλ. HBV, HCV, HIV και γρίπης καθώς και κατά ιών χωρίς περίβλημα, π.χ. ²αδενο-, ²νορο-, πολιο- και πολιομαϊοί (SV40)

¹ μετά τον προκαταρκτικό καθαρισμό με WL-clean

* Σημείωση: Χρησιμοποιείτε προσαρμογείς μόνο σύμφωνα με τις εγκρίσεις εφαρμογής των κατασκευαστών των οργάνων. Ανατρέξτε στη σελίδα 10 – 14 των παρόντων οδηγιών χρήσης.

5.5 WL-dry/WL-Blow

Στέγνωμα με WL-dry ή WL-Blow



- 5.5.1 Συνδέστε σταθερά τον κατάλληλο **ALPRO-Adapter*** στο **στεγνό δοχείο WL (dry can)/στο WL-Blow (πιστόλι πεπιεσμένου αέρα)**
- 5.5.2 Συνδέστε το όργανο στον προσαρμογέα.
- 5.5.3 Ψεκάστε το όργανο **για 2 x 3 δευτερόλεπτα**
- 5.5.4 Αφαιρέστε το όργανο από τον προσαρμογέα

5.6 Ιδιότητες WL-dry/WL-Blow

- ιατρικά καθαρό αέριο (WL-dry)
- στέγνωμα
- υποστηρίζει τον καθαρισμό

* Σημείωση: Χρησιμοποιείτε προσαρμογείς μόνο σύμφωνα με τις εγκρίσεις εφαρμογής των κατασκευαστών των οργάνων. Ανατρέξτε στη σελίδα 10 – 14 των παρόντων οδηγιών χρήσης.

5.7 Συντήρηση

Συντήρηση των οργάνων σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών



με την ευγενική χορηγία της εταιρείας KaVo

Σημείωση:

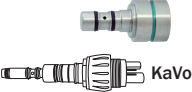
Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, τα όργανα πρέπει να συντηρούνται (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και, εάν είναι απαραίτητο, ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου, να συσκευάζονται (κρίσιμη Β) με θερμικές μεθόδους (ακολουθήστε την τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας).

6. Στοιχεία παραγγελίας (συμπερ. των προσαρμογών)

REF	ονομασία	που αποτελείται από:
4149	WL-clean σετ συνδυασμού	 1 x 500 ml WL-clean 1 x 300 ml WL-dry
4150	WL-clean πακέτο κλινικής	 4 x 500 ml WL-clean
4141	WL-cid σετ συνδυασμού	 1 x 500 ml WL-cid 1 x 300 ml WL-dry
4140	WL-cid πακέτο κλινικής	 4 x 500 ml WL-cid
3165	WL-dry πακέτο κλινικής	 4 x 300 ml WL-dry
4160	WL-Blow Set	 1 x πιστόλι πεπιεσμένου αέρα 1 x ταχυσύνδεσμος G 1/4" 2 x περιοριστής αέρα
4158	WaterJet-Πιστόλι συσκευή για τον προ-καθαρισμό οδοντιατρικών οργάνων μετάδοσης και άλλων ιατρικών κοίλων οργάνων	 1 x πιστόλι νερού (προσαρμοσμένο) με περιοριστή ροής νερού και ορειχάλκινο σύνδεσμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα 1 x σύστημα εύκαμπτων σωλήνων 8 mm, διαφανές με σφαιρική βαλβίδα και εύκαμπο σωλήνα 3/8"
4147	WL-dry StarterSet	 2 x 500 ml WL-clean 2 x 500 ml WL-cid 2 x 300 ml WL-dry
4144	WL-Blow StarterSet	 2 x 500 ml WL-clean 2 x 500 ml WL-cid 1 x WL-Blow Set

REF	ονομασία		που αποτελείται από:
3521	WL-Adapter 01 (πλαστικό)		Προσαρμογέας γενικής χρήσης με σύνδεση Luer για όργανα μετάδοσης (σύνδεσμος ISO 9168) για την εισαγωγή προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης (π.χ. WL-clean, WL-cid, λάδι συντήρησης) και για στέγνωμα με φύσημα με WL-dry/WL-Blow. (Σημείωση: Μόνο ένα κανάλι είναι δυνατό κάθε φορά). Κατάλληλο επίσης για την εκτόνωση με τη χρήση της σύριγγας πολλαπλών λειτουργιών και για την εισαγωγή του διαλύματος καθαρισμού WL-clean μέσω σύνδεσης Luer, π.χ. σε γενικά κοίλα όργανα.

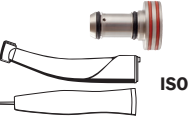
Προσαρμογέας για κανάλια ψεκασμού νερού/κανάλια ψεκασμού αέρα*

REF	ονομασία		που αποτελείται από:
3523	WL-Adapter 03 (ανοξειδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για τουρμπίνες με διεπαφή Sirona.
3524	WL-Adapter 04 (ανοξειδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για στρόβιλους (τουρμπίνες) με διεπαφή Multiflex (KaVo/SciCan).

*Λάβετε υπόψη τις τρέχουσες κυκλοφορίες των κατασκευαστών οργάνων!

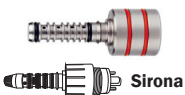
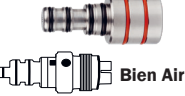
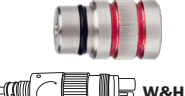
Περαιτέρω προσαρμογείς για κανάλια ψεκασμού νερού και κανάλια ψεκασμού αέρα άλλων κατασκευαστών στρόβιλων, κατόπιν αιτήματος.

Προσαρμογείς για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό*

REF	ονομασία		που αποτελείται από:
3547	WL-Adapter 02/G (ανοξειδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για όλα τα τεμάχια χειρός και τα γωνιακά τεμάχια με διεπαφή ISO για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των εργαλείων.

*Λάβετε υπόψη τις τρέχουσες εγκρίσεις των κατασκευαστών οργάνων!

Προσαρμογείς για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό*

REF	ονομασία		που αποτελείται από:
3533	WL-Adapter 03/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για στροβίλους (τουρμπίνες με διεπαφή Sirona για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των στροβίλων.
3534	WL-Adapter 04/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για στροβίλους (τουρμπίνες) με διεπαφή Multiflex-(KaVo/SciCan) για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των στροβίλων.
3535	WL-Adapter 05/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για στροβίλους (τουρμπίνες) με διεπαφή Bien Air για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των στροβίλων.
3536	WL-Adapter 06/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για στροβίλους (τουρμπίνες) με διεπαφή Roto-Quick (W&H) για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των στροβίλων.
3537	WL-Adapter 07/G (πλαστικές ύλες)		Προσαρμογέας για αντιγωνίες με μακρύ στέλεχος Sirona T1 Classic για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των οργάνων.
3539	WL-Adapter 09/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για στροβίλους (τουρμπίνες) με διεπαφή NSK για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των στροβίλων.
3561	WL-Adapter 10/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για στροβίλους (τουρμπίνες) με διεπαφή Morita για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των στροβίλων.
3563	WL-Adapter 11/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για ακροφύσιο αεροκαθαριστή ACTEON-AIR N GO Airpolisher Supra/Perio για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των οργάνων.
3577	WL-Adapter 14/G (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για την εφαρμογή προϊόντων WL σε όργανα με σύνδεση Borden 4 οπών και σύνδεση Midwest 4 οπών για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*, συμπερ. της κεφαλής των οργάνων.

*Λάβετε υπόψη τις τρέχουσες εγκρίσεις των κατασκευαστών οργάνων!

Προσαρμογείς για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό*

REF	ονομασία		που αποτελείται από:
3564	WL-Adapter 12/MF (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας για κάνουλες χειρολαβής KaVo MF για τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό/την πλήρη απολύμανση*.

Προσαρμογέας για ακροφύσια υπερήχων και αέρα*

REF	ονομασία		που αποτελείται από:
3571	WL-Adapter U-1 + U-1a Kombi (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας έκπλυσης U-1 για ακροφύσια υπερήχων και βιδωτό εξάρτημα U-1a για σύνδεση βύσματος εύκαμπτου σωλήνα.
3570	WL-Adapter U-1 (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας έκπλυσης για ακροφύσια υπερήχων/ηχητικά ακροφύσια με εσωτερικό σπείρωμα M3 των EMS, Mectron, KaVo, Komet.
3572	WL-Adapter U-2 (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας έκπλυσης για ακροφύσια υπερήχων/ηχητικά ακροφύσια με εσωτερικό σπείρωμα M3 των EMS, Mectron, KaVo, Komet, NSK.
3573	WL-Adapter U-3 (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας έκπλυσης για ακροφύσια υπερήχων/ένα εσωτερικό σπείρωμα M3/α των Satelec, NSK.
3574	WL-Adapter U-4-S (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας έκπλυσης για ακροφύσια υπερήχων στο εσωτερικό σπείρωμα Πιεζοχειρουργικής από το NSK (βαριατρικό χειρουργείο), Mectron (Πιεζοχειρουργική).
3575	WL-Adapter U-5-S (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας έκπλυσης για ακροφύσια υπερήχων/ηχητικά ακροφύσια με εξωτερικό σπείρωμα χειρουργείων με υπέρηχους Sirona (Siroprep και Siroimplant).
3576	WL-Adapter U-6-S (ανοξείδωτο ατσάλι)		Προσαρμογέας έκπλυσης για ακροφύσια υπερήχων στο εσωτερικό σπείρωμα χειρουργείου με υπέρηχους από το Acteon (2ης γενιάς) π.χ. Piezotome.

*Λάβετε υπόψη τις τρέχουσες εγκρίσεις των κατασκευαστών οργάνων!



REF	ονομασία	που αποτελείται από:
4162	WL-Blow περιοριστής αέρα	
3528	Σετ δακτυλίων O για WL-Adapter O2	3 x 2 τεμάχια
3529	Σετ δακτυλίων O για WL-Adapter O3 και O6	3 x 3 τεμάχια
3543	Σετ δακτυλίων O για WL-Adapter	1 x 2 τεμάχια
3545	Σετ δακτυλίων O για WL-Adapter O3/G	1 x 2 τεμάχια
3544	Σετ δακτυλίων O για WL-Adapter O4/G	1 x 3 τεμάχια
3546	Σετ δακτυλίων O για WL-Adapter O6/G	1 x 1 τεμάχια

7. Δηλώσεις κινδύνου και προφυλάξεις

WL-clean (1) **CE**

Προσοχή. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

WL-cid (2) **CE** 0297

Προσοχή. Εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το ΔΔΑ.

WL-dry **CE**

Προσοχή. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμοκρασία δωματίου (18 °C – 23 °C).

Κρατήστε τα δοχεία ψεκασμού σε όρθια θέση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία μεταφοράς: -18 °C – +50 °C

8. Οδηγίες απόρριψης

8.1 α) Απόρριψη του προϊόντος WL-cid (2):

Το μη αραιωμένο προϊόν ή τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, καθώς και τους εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το μη αραιωμένο προϊόν μέσω των λυμάτων. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες ποσότητες του έτοιμου προς χρήση διαλύματος μπορούν να απορριφθούν μόνο εάν παρουσιάζουν σημαντική αραίωση (με 10 φορές την ποσότητα νερού) μέσω των λυμάτων. Μην τα αναμειγνύετε με άλλα απόβλητα.

β) Απόρριψη των προϊόντων WL-clean (1) και WL-dry:

Τα υπολείμματα των προϊόντων πρέπει να απορρίπτονται ως ακίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, καθώς και τους εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς. Μην τα αναμειγνύετε με άλλα απόβλητα.

8.2 Απόρριψη της συσκευασίας (σύσταση για WL-clean (1), WL-cid (2) και WL-dry):

Οι συσκευασίες πεπιεσμένου αερίου πρέπει να αδειάζουν σωστά και να μπορούν στη συνέχεια να ανακυκλωθούν.

9. Αναφορά περιστατικών

Παρακαλείστε να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που μπορεί να συμβεί σε σχέση με το προϊόν στη διεύθυνση:

ALPRO MEDICAL GMBH

e-mail: quality@alpro-medical.de

τηλέφωνο: **+49 7725 9392-0**

και η εθνική αρχή



Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία όσον αφορά τη ροή εργασιών και όλες τις τρέχουσες οδηγίες εργασίας, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τις οδηγίες χρήσης κ.τ.λ. μπορείτε να τις λάβετε στον ιστότοπό μας: www.alpro-medical.de

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο **www.alpro-medical.de** ή στο τηλέφωνο **+49 7725 9392-0**.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους αντιπροσώπους πωλήσεων μας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.